

Zeg vaarwel tegen de platte voorvoet!

Postoperatieve zorg – opnieuw gedefinieerd.

Relief Dual®: de alleskunner voor een verscheidenheid aan behandelopties.



Relief Dual® Voorvoet ontlastende schoen



- > Continue, stijve versterking van de basis van de schoen
- > Innovatieve dubbele zool-technologie
- > Optimale schokabsorptie
- > Verminderde kracht
- > Ruimte voor inlegzool door de uitneembare binnenzool (ook voor diabetische voet)


- > Verbeterde drukverdeling
- > Meer stabiliteit
- > Verhoogde negatieve hiel door gebruik van de modulaire Puzzle Insole® of de Relief Contour Insole

Complementeer de Relief Dual® met diverse inlegzolen voor individuele zorgvereisten volgens indicatie.



DARCO

- > Brede klittenbandsluiting over de wreef
- > Riemlussen aan beide zijden
- > Klittenbandsluiting kan op lengte worden afgesneden

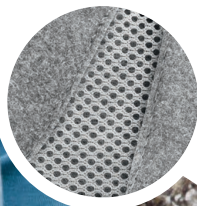

- > Modern design
- > Licht, ademend bovenmateriaal



- > Stabiele hielkap voor verbeterde stabiliteit van de voet
- > Verkrijgbaar in 7 maten
- > Zachte voering



- > Ruimte voor inlegzool door uitneembare binnenzool (ook voor diabetische voet)
- > Laag profiel, geen hoogte aanpassing nodig



- > Naadloos en grotere comfortzone, bijvoorbeeld na Hallux Valgus operatie



- > Brede opening
- > Makkelijk in gebruik




- > Rubberen anti-slip zool
- > Verbeterde schokabsorptie met name in hiel- en balgebied



- > Verwijderbare zool
- > Kan vervangen worden door: Puzzle Insole®, Relief Contour Insole, PegAssist® Insole of PegContour Insole




- > Opgebouwd in lagen voor betere drukverdeling door de lange, stevige binnenzool

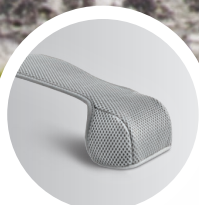

- > Toe Cap optioneel verkrijgbaar
- > Bescherming voor de tenen
- > Beschermt de tenen tegen kou en vuil

Relief Dual®

Voorvoet ontlastende schoen

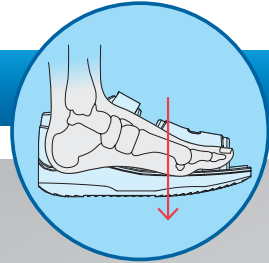

Bewezen kwaliteit, innovatief concept!
Terug geschoven draaipunt voor minder druk op de voorvoet.




De Relief Dual® schoen heeft geen plateau in de voorvoet regio, biedt stabiliteit en vermindert de druk op de voet na voetoperatie.

De Relief Dual® maakt indruk met een innovatief en nieuw ontwerp dubbele zool-technologie: een rubberen buitenzool voor contact met de grond gecombineerd met een EVA-binnensool voor optimale schokabsorptie. Deze combinatie van beide materialen zorgt voor een aanzienlijk verbeterde schokabsorptie, slipweerstand en geoptimaliseerde roleigenschappen van de schoen.



Er is vrijwel geen beweging van de enkel tijdens elke stap dankzij de continue, stijve versteviging van de basis van de schoen die tevens zorgt voor een betere ontlasting van de voorvoet. Bovendien bereikt deze schoen zo een verbeterde drukverdeling.

Gemiddelde vermindering van drukpunten

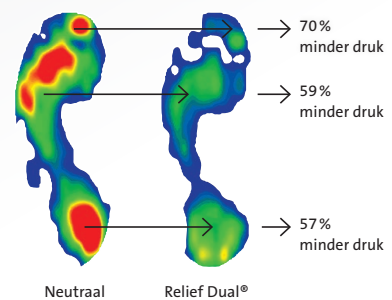


Puzzle Insole®

Modulaire inlegzool

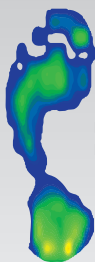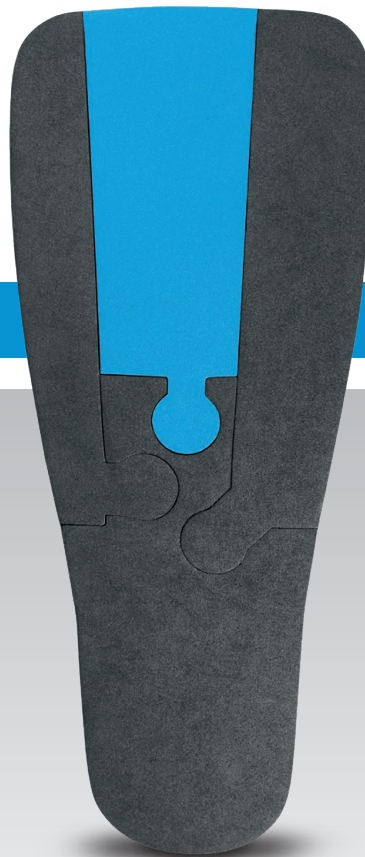

Neutraal Relief Dual®

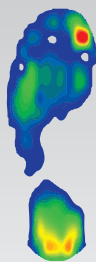

Puzzle Insole® (middelste module aangepast in de Relief Dual® schoen)

Indicatie-specifieke drukverlichting door een modulaire binnenzool met verwisselbare elementen

Eenvoudig te verwisselen modules maken het mogelijk om patiënt-specifiek of indicatie-specifiek aanpassingen te doen voor drukverdeling. De negatieve hak van 2,4 graden zorgt voor extra voorvoet ontlasting. In het gebied waar de voet extra verlichting nodig heeft is de zwarte EVA module (30 Shore) te vervangen door het zachtere blauwe EVA-element (9 Shore).

INDICATIES

1 Kleine teen module (small)

- > Taylor's bunion
- > Jones fractuur

2 Middelste module




- > Weil en/of Helal osteotomie I-IV
- > Mortons neuroma
- > Hamerteen en Klauwteen correcties
- > PIP arthrodesis

3 Grote teen module (breed)

- > Osteotomie: Austin, Scarf, Akin, Youngswick
- > Arthrodesis: Lapidus, MTP gewricht en basis gewricht van de grote teen


KENMERKEN

- > Uitwisselbare componenten
- > Kan zowel aan de rechter- als linkervoet gedragen worden

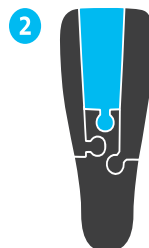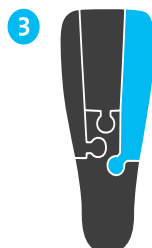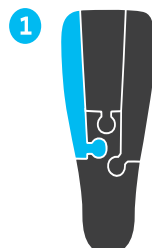

Relief Contour Insole

Kussen inlegzool

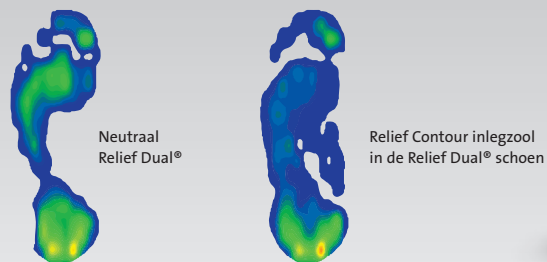

Drukherverdeling tot bijna 90% als gevolg van bijna volledig contact


De Relief Contour Insole is een doorlopende kussen-binnenzool. Een drukherverdeling van bijna 90% wordt bereikt door de anatomisch aangepaste contouren. De zijdelingse en de mediale longitudinale boog en de proximale dwarse boog bieden optimale herverdeling van de druk. Grote drukpunten worden volledig vermeden. Het polyurethaan materiaal herstelt snel zijn vorm. Door de negatieve hak wordt een dorsaalflexie van 2,4 graden bereikt, waardoor extra ontlasting van de voorvoet ontstaat. Een aangename Jersey/Lycra gebreide bekleding verhoogt het draagcomfort.

INDICATIES

- > Voor gebruik na Hallux Valgus en kleine teenoperaties (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)
- > Talipes valgus, platvoet en spreidvoet
- > Angioneuropathische veranderingen van de voet in combinatie met milde voetmisvormingen


KENMERKEN

- > Inlegzool gemaakt van veerkrachtig materiaal
- > PU-materiaal is aanpasbaar en kan gewijzigd worden
- > 2,4 graden negatieve wig distaal tot proximaal
- > Linkse en rechtse variant apart verkrijgbaar

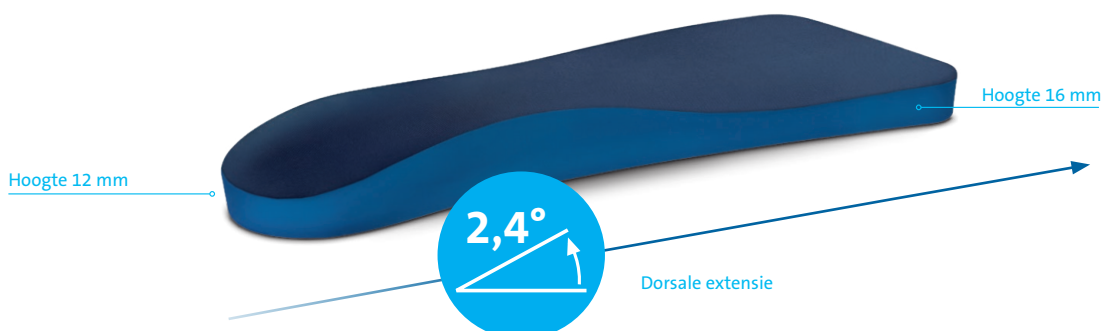


PegAssist® Insole


Voorvoet ontlastende, aanpasbare inlegzool

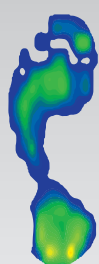

Neutraal
Relief Dual®

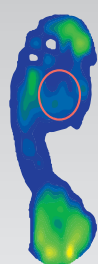

PegAssist® inlegzool
(MTP II en III gespaard)
in de Relief Dual® schoen

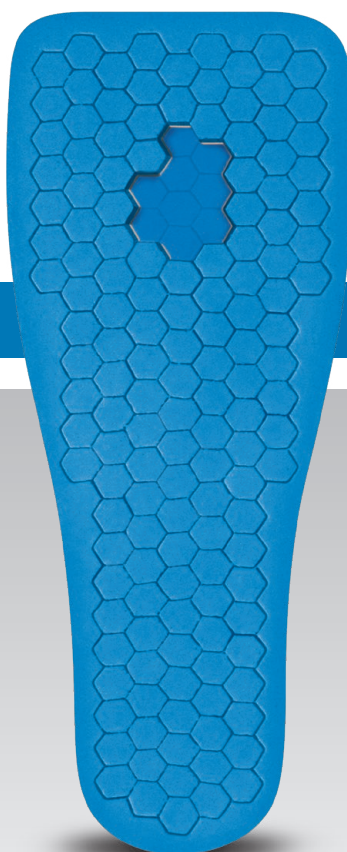

Selectieve ontlasting door individueel aanpasbare zones

De PegAssist®-binnenzool is ontworpen om selectieve plantaire ontlasting te bieden tot wel 50%. De PegAssist® zool wordt voornamelijk gebruikt bij acute behandelingen, maar is ook ideaal voor DFS-behandelingen. Eenvoudige verwijdering van individuele noppen maakt selectieve ontlasting mogelijk. Een dunne steunplaat stabiliseert het gebied van de ontlasting en houdt de resterende noppen op hun plaats. De combinatie van een 18 mm PE-schuimlaag, Poron® en EVA helpen bij het bereiken van een optimale drukontlasting


INDICATIES

Selectieve ontlasting voor:

- > Plantaire laesies
- > Plantaire ulcera
- > Drukpunten


KENMERKEN

- > Kan zowel aan de rechter- als linkervoet gedragen worden

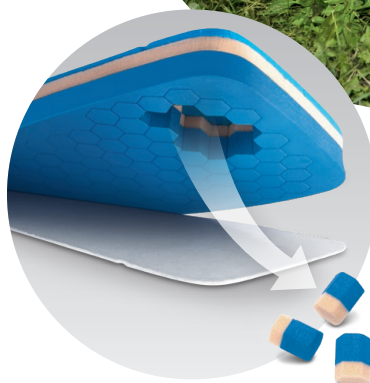

PegContour® Insole

Ontlastende kussen inlegzool

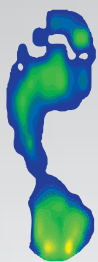

Neutraal Relief Dual®



PegContour inlegzool (MTP II en III gespaard) in de Relief Dual® schoen



De negatieve hiel zorgt voor een dorsale extensie van 1,7 graden, daarom kunnen de noppen in het gebied van de achtervoet niet worden verwijderd.

Volledige drukherverdeling evenals optionele gerichte ontlasting

De PegContour binnenzool is een effectief, driedimensionaal binnenzool systeem voor herverdeling van plantaire druk. Door enkele noppen te verwijderen is maatwerk mogelijk – postoperatief of voor acute wondverzorging. Een dunne laag gemaakt van EVA (zoolbasis) stabiliseert het ontlastte gedeelte en houdt de resterende pinnen op hun plaats. De zijdelingse en de mediale longitudinale boog en de proximale dwarse boog bieden optimale herverdeling van de druk. De druk wordt tot 55% verminderd.

INDICATIES


- > Voor gebruik na Hallux Valgus en kleine teenoperaties (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)
- > Talipes valgus, platvoet en spreidvoet
- > Angioneuropathische veranderingen van de voet in combinatie met milde voetmisvormingen

Selectieve ontlasting voor:


- > Plantaire laesies
- > Plantaire ulcera/preventie
- > Drukpunten

KENMERKEN

- > Zachte overlans en kruiselingse bovenzijde gemaakt van functioneel polyester
- > Aanpasbaar PU-materiaal
- > Aangepaste pasvorm door het verwijderen van enkele noppen
- > Linkse en rechtse variant apart verkrijgbaar

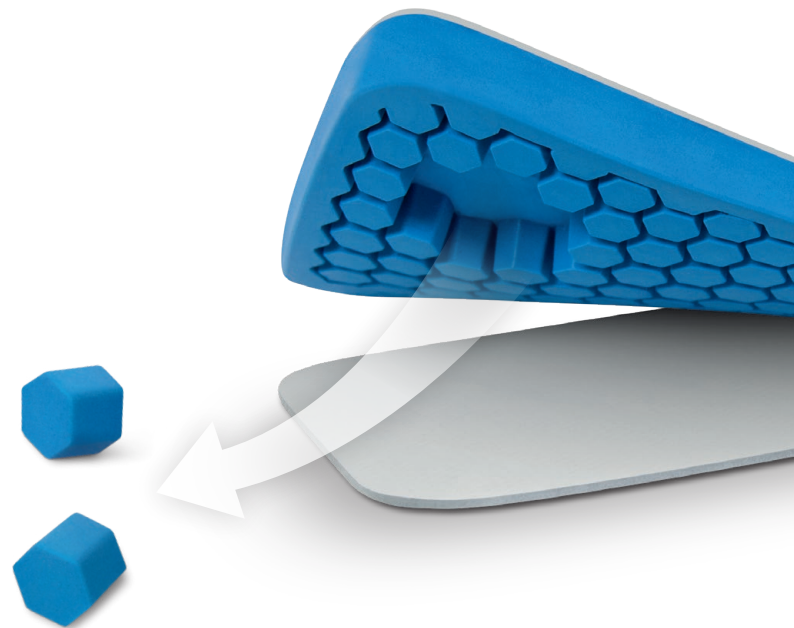

Maten en afmetingen

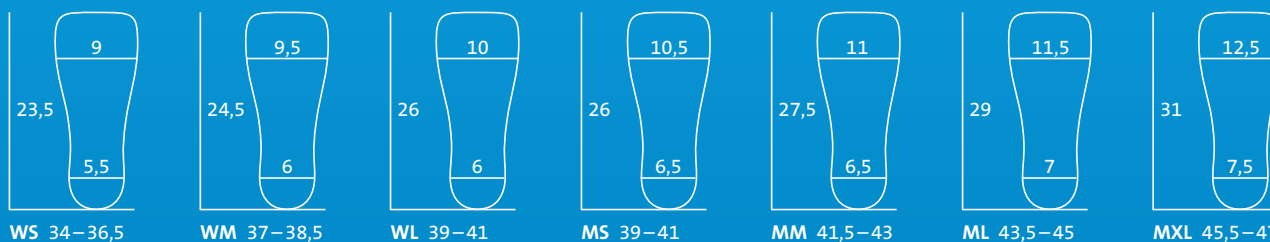

Alle afmetingen zijn in cm en komen overeen met de grootte van de binnenzool.

Productoverzicht

MAAT	ART.NR.	MAAT	ART.NR.	MAAT	ART.NR.
------	---------	------	---------	------	---------

Relief Dual®

Vrouwen
 WS 34,0 – 36,5 DA RD-W1
 WM 37,0 – 38,5 DA RD-W2
 WL 39,0 – 41,0 DA RD-W3

Mannen
 MS 39,0 – 41,0 DA RD-M1
 MM 41,5 – 43,0 DA RD-M2
 ML 43,5 – 45,0 DA RD-M3
 MXL 45,5 – 47,0 DA RD-M4



Puzzle Insole®

Vrouwen
 WS 34,0 – 36,5 DA PI-WS
 WM 37,0 – 38,5 DA PI-WM
 WL 39,0 – 41,0 DA PI-WL

Mannen
 MS 39,0 – 41,0 DA PI-MS
 MM 41,5 – 43,0 DA PI-MM
 ML 43,5 – 45,0 DA PI-ML
 MXL 45,5 – 47,0 DA PI-MXL



Relief Contour Insole

Vrouwen	Rechts	Links
WS 34,0 – 36,5	DA RC-W1-R	DA RC-W1-L
WM 37,0 – 38,5	DA RC-W2-R	DA RC-W2-L
WL 39,0 – 41,0	DA RC-W3-R	DA RC-W3-L

Mannen	Rechts	Links
MS 39,0 – 41,0	DA RC-M1-R	DA RC-M1-L
MM 41,5 – 43,0	DA RC-M2-R	DA RC-M2-L
ML 43,5 – 45,0	DA RC-M3-R	DA RC-M3-L
MXL 45,5 – 47,0	DA RC-M4-R	DA RC-M4-L



Toe cap (optioneel)

Vrouwen
 WS 34,0 – 36,5 DA TCDW1
 WM 37,0 – 38,5 DA TCDW2
 WL 39,0 – 41,0 DA TCDW3

Mannen
 MS 39,0 – 41,0 DA TCDM1
 MM 41,5 – 43,0 DA TCDM2
 ML 43,5 – 45,0 DA TCDM3
 MXL 45,5 – 47,0 DA TCDM4



PegAssist® Insole

Vrouwen
 WS 34,0 – 36,5 DA PAS-W1
 WM 37,0 – 38,5 DA PAS-W2
 WL 39,0 – 41,0 DA PAS-W3

Mannen
 MS 39,0 – 41,0 DA PAS-M1
 MM 41,5 – 43,0 DA PAS-M2
 ML 43,5 – 45,0 DA PAS-M3
 MXL 45,5 – 47,0 DA PAS-M4



PegContour® Insole

Vrouwen	Rechts	Links
WS 34,0 – 36,5	DA PCI-W1-R	DA PCI-W1-L
WM 37,0 – 38,5	DA PCI-W2-R	DA PCI-W2-L
WL 39,0 – 41,0	DA PCI-W3-R	DA PCI-W3-L

Mannen	Rechts	Links
MS 39,0 – 41,0	DA PCI-M1-R	DA PCI-M1-L
MM 41,5 – 43,0	DA PCI-M2-R	DA PCI-M2-L
ML 43,5 – 45,0	DA PCI-M3-R	DA PCI-M3-L
MXL 45,5 – 47,0	DA PCI-M4-R	DA PCI-M4-L